



AquaSnap ien nem og simpel ATP test til væsker som er kompatibel med Hygiene's ATP platforme. Testen er tilgængelig i to formater: Frit (Free) og Total. AquaSnap Free måler opløst ATP som findes frit i opløsningen (non-mikrobielt ATP).

AquaSnap Total måler både frit ATP i opløsningen og mikrobielt ATP (så både non-mikrobielt og mikrobielt ATP).

Differencen mellem de to målinger (Total og Frit ATP) giver en indikation på om der er en mikrobiel kontamination i prøven.

Begge tests har en specielt designet prøveopsamler som opsamler 100 µl væske, hvilket sikrer en ensartet prøvetagning.

Testen unikke stabile reagens kombineret med det simple design, giver en hidtil uset præcision og reproducerbarhed. AquaSnap anvendes ofte til at overvåge CIP systemer og industrielle vandbehandlings systemer som køletårne og lukkede vandsystemer.

ATP Microbial ATP

ATP Free ATP


Total ATP = **ATP** + **ATP**

Fordele:

- Nemt og simpelt at anvende
- Resultat på 15 sekunder
- Patenteret Snap-Valve™ design der giver nøjagtige resultater med minimal variation.
- Unik og stabil reagens der giver øget nøjagtighed og reproducerbarhed
- Reagens der er robust overfor temperatur og rengøringskemi
- Honningske der opsamler 100 µl prøve
- 100% genbrugsplastik
- 15 måneders holdbarhed ved opbevaring i køleskab (2- 8°C)
- 4 ugers holdbarhed ved opbevaring i rumtemperatur (21-25°C)


Sensitivt:

- Meget sensitiv- detekterer ned til 0.1 femtomol ATP med EnSURE eller Pi-102 instrumenter
- Detekterer ned til 100 CFU

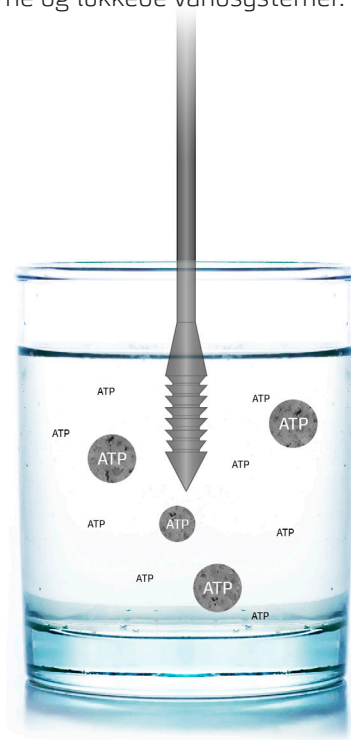

Vare nr.	Beskrivelse	Antal
AQ-100X	AquaSnap Total	100
AQ-100FX	AquaSnap Free	100

AquaSnap Procedure:

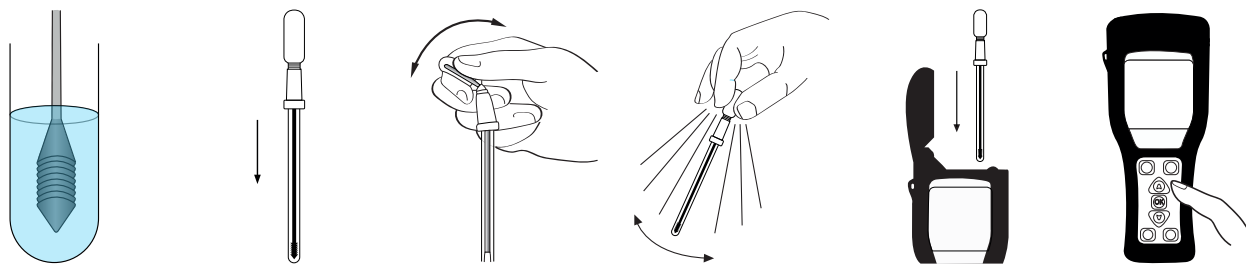

Relaterede Produkter:



EnSURE

EnSURE er en høj-sensitiv ATP platform der måler mange forskellige parametre så som ATP, Totalkim, Coliforme, *E.coli* og meget mere på samme platform. EnSURE platformen inkluderer SureTrend software.



SystemSURE Plus

SystemSURE Plus bruges til ATP hygiejne overvågning. Dette håndholdte instrument er nemt at anvende, ekstremt sensitiv og billigt. SystemSURE Plus tillader brugerne hurtigt at bestemme rengøringens effektivitet og den generelle hygiejnestatus på overflader og i vand, hvilket fører til højere produktkvalitet og reduktion af omkostninger. SystemSure Plus platformen inkluderer SureTrend software.



UltraSnap & SuperSnap



UltraSnap måler ATP på overflader. SuperSnap er Hygiene's mest sensitive ATP overflade test. Designet til at fungere på alle Hygiene instrumenter. UltraSnap og SuperSnap er simple test der detektere lave niveauer af ATP.



MicroSnap Indikatororganisme tests



MicroSnap er hurtigmetoder til detektion og tælling af specifikke bakterier. Resultat foreligger på 8 timer eller mindre. Detektion af lave bakterieniveauer (1-10 CFU) på 8 timer, hvilket giver en unik mulighed for resultater på samme arbejdsdag eller skift.



MicroSnap findes til fire parametre: Totalkim, Enterobacteriaceae, Coliforme og *E.coli*.

Vare nr.	Beskrivelse	Antal
ENSURE	EnSURE ATP System med SureTrend Software	1
SS3	SystemSure Plus ATP System med SureTrend Software	1
US2020	UltraSnap ATP test	100
SUS3000	SuperSnap "High Sensitivity" ATP test	100
MS-Total100	MicroSnap Total	100
MSEN100	MicroSnap Coliform	100
MSEC100	MicroSnap <i>E.coli</i>	100
MS-2EB	MicroSnap Enterobacteriaceae	100